

Oikean
sävyn
löytäminen
on entistä
helpompaa.

3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi

- ▶ Intuiitiivinen sävyn valinta
- ▶ Luonnollinen opaakkisuus
- ▶ Vähemmän tuotteita varastossa



3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi

Bright. Natural. Warm.

Valittavissa on vain kolme sävyä, joista löytyy sopiva sävy lähes jokaiselle potilaalle.

Tuotteen hyödyt:

- ▶ yksinkertaisempi työnkulku yksisävyisissä restauraatioissa
- ▶ luonnollinen lopputulos
- ▶ virtaviivainen järjestelmä, joka perustuu kliinisesti todistettuun nanoteknologiaan
- ▶ nopea ja intuitiivinen sävyn valinta sekä etu- että takahampaiden restauraatioon

Sävyjen yhteensovittaminen on yksinkertaista. Helppoa. Intuitiivista.

- ☒ Vain 3 sävyä: Bright, Natural, Warm
- ☒ Ei monimutkaista sävykarttaa
- ☒ Blocker -ainetta ei tarvita

Yksinkertaisuutta ilman kompromisseja.

Joidenkin yksinkertaisen sävyjärjestelmän yhdistelmämuovien haittapuolena on riittämätön estetiikka. Filtek Easy Match -yhdistelmämuovin sävyt vastaavat erinomaisesti hampaiden sävyä. Yhdistelmämuovin sävy sulautuu ympäröiviin hampaisiin ja antaa luonnollisen näköisen hymyn.



“Filtek Easy Match tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun päivittäisiin restauraatioihin. Tämän tuotteen avulla vähennät varastossa olevien tuotteiden määrää ja teet laadukkaita restauraatioita!”

– hll Thomas Giacobbi
Chandler, AZ, Yhdysvallat

Sävyn valinta on intuitiivista ja yksinkertaista:

Kroman eli värikylläisyyden määrittely on vain yksi vaihe oikean sävyn löytämisessä. Jopa “oikean värinen” yhdistelmämuovi voi erottua ympäröivistä hampaista, jos sen **arvo** (suhteellinen valoisuus/tummuus) tai **opaakkiisuus** ei vastaa hampaiden sävyä.

3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovin kolme sävyä kattavat klassiset VITA-värikartan sävyt – blocker -ainetta ei tarvita.

3M™ Filtek™ Easy Match on käänteentekevä tuote kaltaisille hammaslääkäreille, jotka pyrkivät huipputuloksiin yksinkertaisin keinoin. Sen erinomainen sävyjen yhteensovittamiskyky yksinkertaistaa värisävyn valintaa ja mahdollistaa tarkat lopputuloksen pienellä vaivalla. Työskentely on sujuvaa ja vaivatonta, mikä mahdollistaa helpon annostelun. Tämän yhdistelmämuovin avulla viimeistely on virheetöntä ja luonnollisen hymyn saavuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Se ei ole vain tuote, vaan välttämätön materiaali jokaiselle hammaslääkärille joka etsii yksinkertaisuutta, tehokkuutta ja esteettistä erinomaisuutta.


– hll Jordi Manauta, *Italia*

Bright



Bright: matala värikylläisyys, korkea valoisuus

Natural

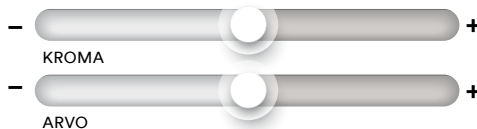

Natural: Tasapainoitettu, keskitason värikylläisyys ja valoisuus


Warm



Warm: korkea värikylläisyys, matala valoisuus

Tuotteen ensisijaiset edut

- ▶ Erinomainen sävyjen yhteensopivuus useimmissa etu- ja takahampaiden restauraatioissa
- ▶ Nopea, helppo ja intuitiivinen sävyn valinta opaakkiisuudesta tinkimättä
- ▶ Yksinkertaiset yksisävyiset restauraatiot ilman blocker -ainetta
- ▶ Vähemmän tuotteita varastossa auttaa minimoimaan hävikkiä harvoin käytetyistä sävyistä
- ▶ Napakka käsiteltävyys
- ▶ Soveltuu yhdistelmämuovin lämmitykseen, mikä vähentää annosteluun tarvittavaa voimaa¹ aineen fyysisiä ominaisuuksia muuttamatta²

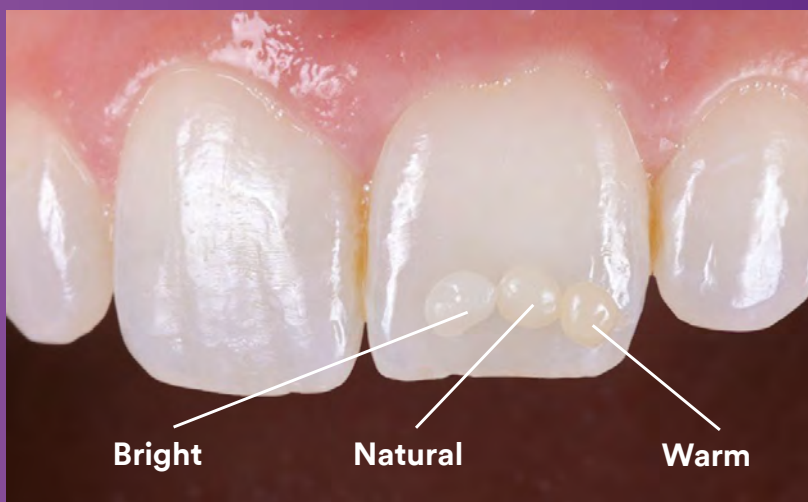


1. 3M:n sisäinen tutkimus

2. Lämmitettynä käyttöohjeemme mukaisesti (kapselit: enintään 70 °C / 158 °F, enintään 1 tunti)

Miten se toimii? Luonnollisesti mukautuvan opaakkisuuden avulla.


3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovin kanssa ei tarvitse käyttää blocker -ainetta suuontelon tummuuden peittämiseen etualueen restauroitiossa. Sen luonnollisesti mukautuva opaakkisuus luo kiillemäisen läpikuultavuuden 0,5-1 mm:n paksuisena juuri oikealle alueelle eli viisteelle ja inkisaalikärkeen. ≥ 2 mm:n paksuisena se tarjoaa dentiiniä vastaavan opaakkisuuden.

Kaikista yhdistelmämuoveista tulee läpikuultavampia, kun niitä levitetään ohuin kerroksin. Filtek Easy Match -yhdistelmämuovin luonnollisesti mukautuva opaakkisuus vastaa optimaalisesti sekä dentiiniä että kiillettä, mikä auttaa sitä sulautumaan ympäröivään hammasrakenteeseen ja antamaan luonnollisen näköisen lopputuloksen.

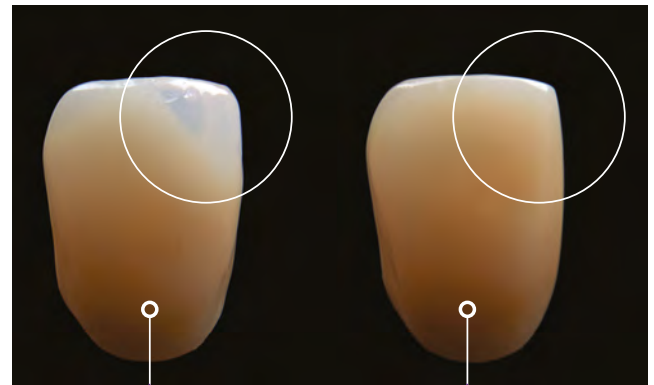

Muun valmistajan
yhdistelmämuovi
Ei käytetty
blocker -ainetta

3M™ Filtek™ Easy Match
-yhdistelmämuovi,
Natural sävy,
ei vaadi blocker -ainetta

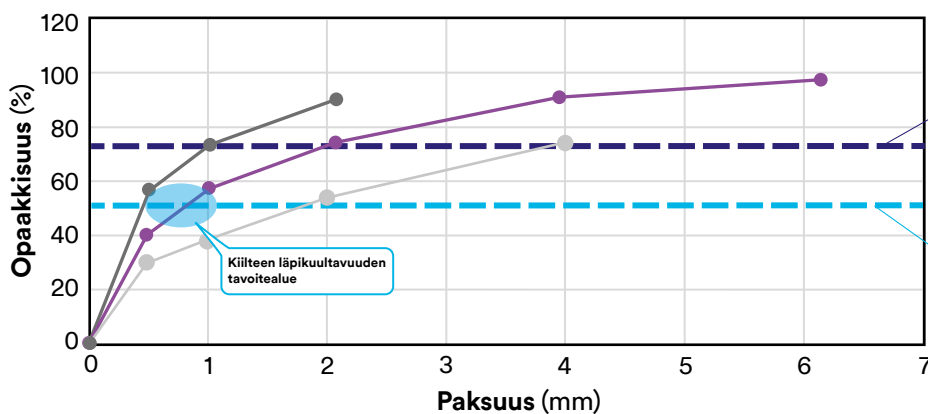

Dentiini

3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovilla on dentiiniä vastaava opaakkisuus ≥ 2 mm:n paksuisena

Kiille

3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi on kiillemäisen läpikuultava 0,5–1 mm:n paksuisena

Lähde: 3M sisäinen*


— 3M™ Filtek™ Supreme XTE -yhdistelmämuovi A2-D — Muun valmistajan (ei käytetty blocker-ainetta)
— 3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi

AITO-nanoteknologia:

Filtek Easy Match -yhdistelmämuovi hyödyntää samaa AITO-nanofilleriteknologiaa, jota käytetään johtavissa Filtek -yhdistelmämuoveissamme. Ainutlaatuiset nanoklusterit mahdollistavat erinomaisen kulumiskestävyyden ja auttavat yhdistelmämuovia säilyttämään tasaisen kiillon.



3M™ Filtek™
Easy Match
-yhdistelmämuovin
nanoklusteri 100 000
-kertaisella suurennuksella

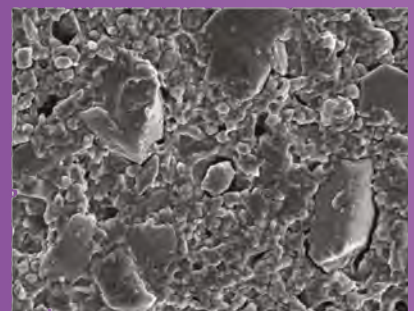

Johtavan kilpailijan
yhdistelmämuovi

SEM-kuvat: hll J. Perdigao, Minnesotan yliopisto.



Osa 3M™ Filtek™ - tuoteperhettä

Luotettavaa laatua
jo yli 50 vuotta.

Yli 2 miljardia restauraatiota.

AITO-nanoteknologiaa hyödyntävät 3M™ Filtek™ -yhdistelmämuovit ovat mahdollistaneet vastaanottoja ympäri maailmaa tekemään yli 2 miljardia restauraatiota. Filtek-tuoteperheestä löydät vaihtoehdon lähes kaikkiin kliinisiin tilanteisiin. Tarjolla on yleiskäyttöisiä yhdistelmämuoveja, flow-muoveja ja bulk fill-yhdistelmämuoveja, jotka soveltuvat sekä etu- ja taka-alueelle.

“Pidän Filtek Easy Match -yhdistelmämuovista todella paljon. Yhdistelmämuovia on erittäin helppo käsitellä ja kiillottaa. Yksinkertaisen sävyjärjestelmän ansiosta tulokset ovat erittäin hyviä.”

– hll Nick Marongiu
La Jolla, CA, Yhdysvallat



Säilyttää
kiillon hyvin



Erinomainen lujuus
ja kulumiskestävyys



Napakka
käsiteltävyys



Turvallinen
yhdistelmämuovin
lämmitykseen ja
ruiskumuottitekniikkaan¹

1. Kapseleita voidaan lämmittää 70 °C:ssa / 158 °F:ssa jopa tunnin ajan.



3M™ Filtek™ Easy Match Universal -yhdistelmämuovi – Bright

Tuotenro Tuotetiedot

6210B (20) Kapselit, 0,2 g/kpl

6220B (1) Ruisku, 4 g/kpl



3M™ Filtek™ Easy Match Universal -yhdistelmämuovi – Natural

Tuotenro Tuotetiedot

6210N (20) Kapselit, 0,2 g/kpl

6220N (1) Ruisku, 4 g/kpl



3M™ Filtek™ Easy Match Universal -yhdistelmämuovi – Warm

Tuotenro Tuotetiedot

6210W (20) Kapselit, 0,2 g/kpl

6220W (1) Ruisku, 4 g/kpl

3M™ Filtek™ Easy Match Universal -yhdistelmämuovi – aloituspakkaukset

Tuotenro Tuotetiedot

6210K (60) Kapselit, 0,2 g/kpl: 20 kpl kutakin sävyä: Bright, Natural ja Warm

6220K (3) Ruiskut, 4 g/kpl: 1 kutakin sävyä: Bright, Natural ja Warm

3M™ Filtek™ Easy Match Universal -yhdistelmämuovi – säästöpakkauskset


Tuotenro Tuotetiedot

6210N (100) Kapselit, 0,2 g/kpl: vain Natural sävy

6220 (5) Ruiskut, 4 g/kpl: vain Natural sävy



[3Msuomi.fi/FiltekEasyMatch](https://3msuomi.fi/FiltekEasyMatch)

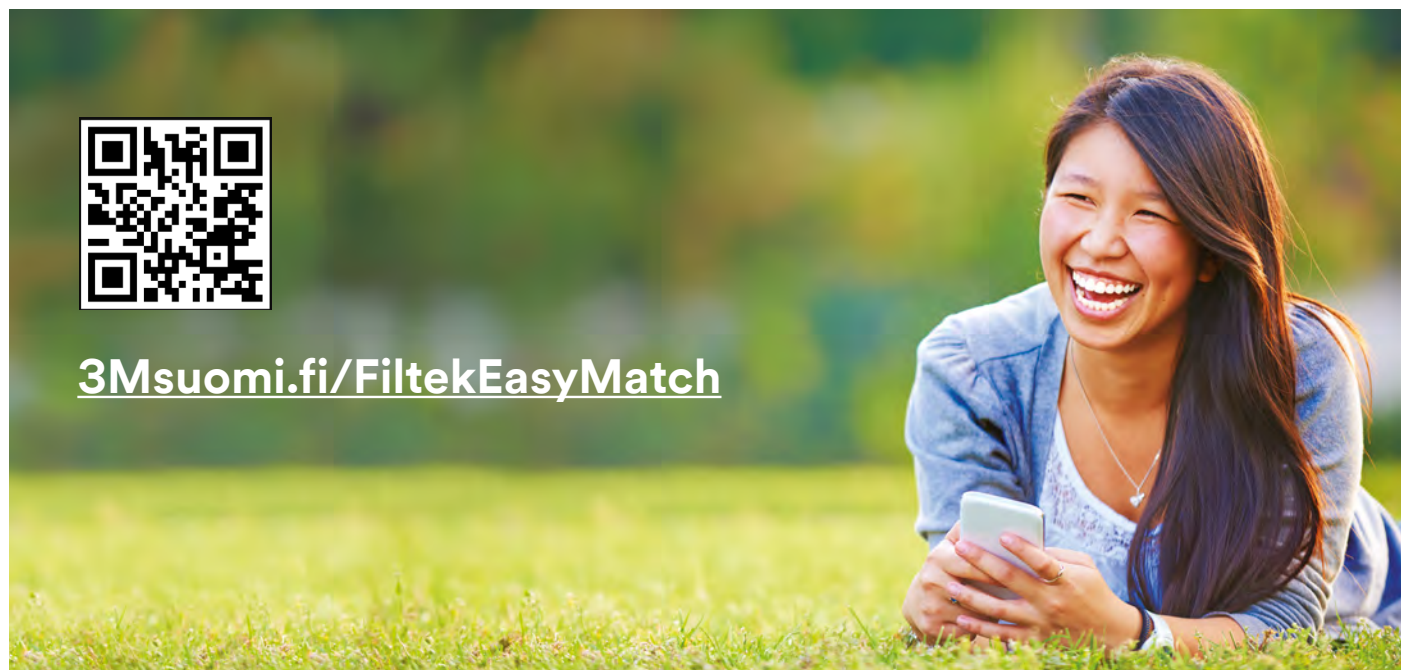

Solventum Dental Solutions
Keilaniementie 1
02150 Espoo
Finland

* Lähde: 3M:n sisäinen tutkimus.

@Solventum 2024. Solventum, Solventum S logo ja Filtek ovat Solventumin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat toisten yhtiöiden omistamia.