

3M Science.
Applied to Life.™

Imprint™ 4 Preliminary
Alginaatin korvike

A-silikoni kaikkiin alginaatti- indikaatioihin



Imprint™ 4 Preliminary

Alginaatin korvike

On aika rikkoa vanhat kaavat.

Tavallisesti alginaatit vaativat useita pitkiä ja sotkuisia työvaiheita, mutta Imprint 4 Preliminary -materiaalin avulla voidaan tuottaa helposti tark-koja alkujäljennöksiä, jotka voidaan valaa kipsiin usemman kerran. Tämän lisäksi Pentamix -järjestelmän automaattisen sekoituksen avulla saadaan täydellinen seos, mikä tekee koko prosessista nopeamman ja ennustettavamman.

		Työskentelyaika (23 °C)	Kovettumisaika suun sisällä (37 °C)
Nopea	Imprint 4 Preliminary Penta™ Super Quick	1:00	1:30
Normaali	Imprint™ 4 Preliminary Penta™	1:30	2:00

Indikaatiot:

- Väliaikaiset kruunu- ja siltajäljennökset
- Vastapurijan jäljennökset
- Tutkimusmallin jäljennökset
- Alkujäljennökset
- Ortodontiset jäljennökset
- Jäljennökset valkaisulusikoille ja hammassuojille

Imprint™ 4 Preliminary – materiaalin ominaisuuksia:

- ▶ **Aikaa säästävä ja siisti automaattisekoitus**
Nopea ja helppo sekoittaminen, tasalaatuinen seos ja tarkat alkujäljennökset
- ▶ **Pitkäaikainen stabiliteetti, kipsivalulla ei ole kiire**
Enemmän joustavuutta ja tehokkuutta
- ▶ **Useita valamiskertoja ilman, että tarkkuus kärsii**
Mallien ja väliaikaisten helppo uusiminen
- ▶ **Hydrofiilisyyys**
Mallien helppo valettavuus, ei tarvetta esikäsittelyaineille, mallin pinnan korkea laatu
- ▶ **Desinfioitavissa helposti ja perusteellisesti**
Tinkimätön hygieenisuus
- ▶ **Materiaalin kirkas väri ja skannattavuus**
Hyvä luettavuus ja mahdollisuus digitaaliseen työskentelyyn
- ▶ **Miellyttävä mintun maku**
Toimenpide on miellyttävämpi potilaalle



Parempi kuin alginaatit


Imprint 4 Preliminary -materiaali

Ei sotkuista käsinsekoitusta, ei puhdistettavaa

Nappia painamalla Pentamix -järjestelmä sekoittaa automaattisesti tasaisen seoksen ilman ilmakuplia. Seoksen laatu on toistettavissa ja sen määrä tarkasti valittavissa.

Pitkäaikainen stabiliteetti, mahdollisuus valaa useaan kertaan

Jäljennöksissä ei ilmene dimensiomuutosta kolmen kuukauden aikana ja ne voidaan valaa milloin tahansa ja niin monta kertaa kuin on tarpeellista. Tämä tekee mallien ja väliaikaisten uusimisesta helppoa.

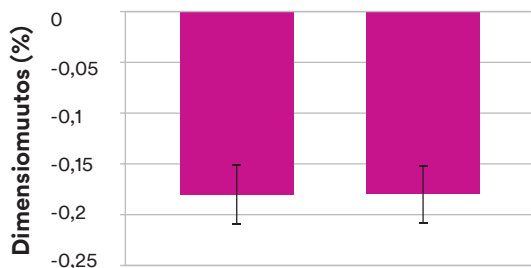

Kuva. 1: Imprint 4 Preliminary materiaalista valmistetun jäljennöksen dimensiomuutos 1 tuntiin ja 12 viikon kuluttua.
Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus.

Täydellinen infektioiden torjunta

Dimensiomuutosten ansiosta jäljennökset voidaan desinfioida perusteellisesti ilman, että niiden tarkkuus kärsii. Ei enää epäpuhtauksia jäljennöksissä.

Alginaatit

- Useita aikaavieviä työvaiheita
- Pölyinen käsinsekoitus
- Seoksen epätasainen laatu

Alginaattijäljennökset on valettava välittömästi, koska ne kutistuvat nopeasti ja ne voidaan valaa vain kerran.

Alginaattijäljennöksiä ei voida desinfoida tehokkaasti. Desinfointi saattaa aiheuttaa myös dimensiomuutoksia.

Täydellinen yhteistyö: Imprint 4 Preliminary materiaali &

Protemp 4-väliaikaismateriaali

Kestävä materiaali, joka sopii kaikkiin jäljennöksen avulla valmistettaviin väliaikaistöihin.

Näiden tuotteiden avulla saadaan hyvin istuva väliaikaistyö, jossa on ohut happi-inhibitiokerros ja sileä pinta ja joka voidaan irrottaa jäljennöksestä vaivattomasti. Lisäksi kiillottaminen on helppoa.



Tee valinta, joka tekee toimenpiteistäsi tehokkaampia:

Markkinoiden nopein ja pienin laite

Pentamix 3 automaattinen sekoituslaite:
3M ESPE:n huippuluokkainen automaattisekoitin.



Kevyin saatavissa oleva laite, helposti siirrettävissä

Pentamix Lite automaattinen sekoituslaite:
Perusmalli käytännöllisellä sekoitusnopeudella.

Lisäksi: 3M ESPE -jäljennöslusikka

Kertakäyttöinen 3M ESPE -jäljennöslusikka on käyttövalmis ja se säästää aikaa, koska lusikkaliimaa ei tarvita. Valitse vain sopiva lusikan koko (S, M tai L) ja täytä lusikka suoraan sekoituslaitteesta.



Tuotenumero Sisältö

Refillit	
71521	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ 2 base – à 300 ml, 2 katalysaattoria – à 60 ml
71522	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick 2 base – à 300 ml, 2 katalysaattoria – à 60 ml
3M™ ESPE™ jäljennöslusikka refillit (jokainen sisältää 10 lusikka)	
71615	Koko S, yläleuka
71616	Koko M, yläleuka
71617	Koko L, yläleuka
71618	Koko S, alaleuka
71619	Koko M, alaleuka
71620	Koko L, alaleuka
Pentamix™ automaattinen sekoituslaite	
77903	Pentamix Lite automaattinen sekoituslaite - 230 V/50 Hz (INT) sisältää 1 Penta -kasetin
77871	Pentamix 3 automaattinen sekoituslaite - 230 V (Länsi-Eurooppa)

Tuotenumero Sisältö

Lisävarusteet	
71525	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ -kasetti Pentamix 2:lle
71526	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick -kasetti Pentamix 2:lle
71527	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ -kasetti Pentamix 3:lle
71528	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick -kasetti Pentamix 3:lle
77944	1 Penta™ -kasetti Pentamix Lite:lle
77949	50 Penta™ -sekoituskärkeä – Punainen
Protemp 4 - väliaikaismateriaali	
46953	Aloituspakkaus – A2 1 patruuna - 50 ml, A2: 16 Garant sinistä sekoitus-kärkeä 1 Garant -annostelija 10:1
	Refillit (jokaisessa 1 patruuna - 50 ml, 16 Garant sinistä sekoituskärkeä)
46959	Valkaistu
46954	A1
46956	A2
46957	A3
46972	A3.5
46960	B3

Imprint 4 Preliminary VPS -materiaali kuuluu Imprint 4 A-silikonijäljennösmateriaalien tuoteperheeseen. **Kokeile** jokapäiväisissä tarkkuusjäljennöksissä myös muita Imprint 4 materiaaleja sekä Imprint 4 Bite purennan rekisteröintimateriaalia



Suomen 3M Oy
Oral Care
Keilaranta 6
PL 600
02151 ESPOO
www.3MESPE.fi

3M, ESPE, Garant, Imprint, Penta ja Pentamix on 3M Company rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2016, 3M.
Kaikki oikeudet pidätetään.
BR6110250-2FI160727.